



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD510/510S



Generalidades

CE

La elevación del asiento del retrete que aquí se detalla, está en conformidad con las pautas de la EG 93/42 para productos médicos.

Ayudas Dinámicas se reserva el derecho de modificar el proyecto técnico descrito en estas instrucciones de uso.

La reproducción, traducciones, copias de cualquier forma, también en partes parciales, necesitan el permiso del fabricante.

Lea las instrucciones del elevador de WC, antes de montarlo.

Estas instrucciones describen la preparación, servicio, utilización, mantenimiento y cuidados del producto.

El elevador del asiento del retrete se suministra de forma que se pueda utilizar inmediatamente.

Cuando reciba el producto verifique si el paquete está golpeado, pues en este caso el contenido podría estar dañado.

Si este fuese el caso, debería ponerlo inmediatamente en conocimiento de la empresa de transporte, para así poder efectuar la reclamación correspondiente.


Garantía

Las prestaciones de garantía se refieren a todos los defectos del producto, sean demostrables o por fallo de fabricación.

Los daños ocasionados por mal uso o el empleo de productos de limpieza inadecuados no están incluidos por la garantía.

Garantía acogida a la ley 23/2003 del 10 de Julio de garantías a la venta de bienes de consumo. (Boe de 11 de julio de 2003 num. 165/2003).

La etiqueta con la referencia, peso máximo, etc. del producto, está adherida en la parte posterior de la barra de apoyo.

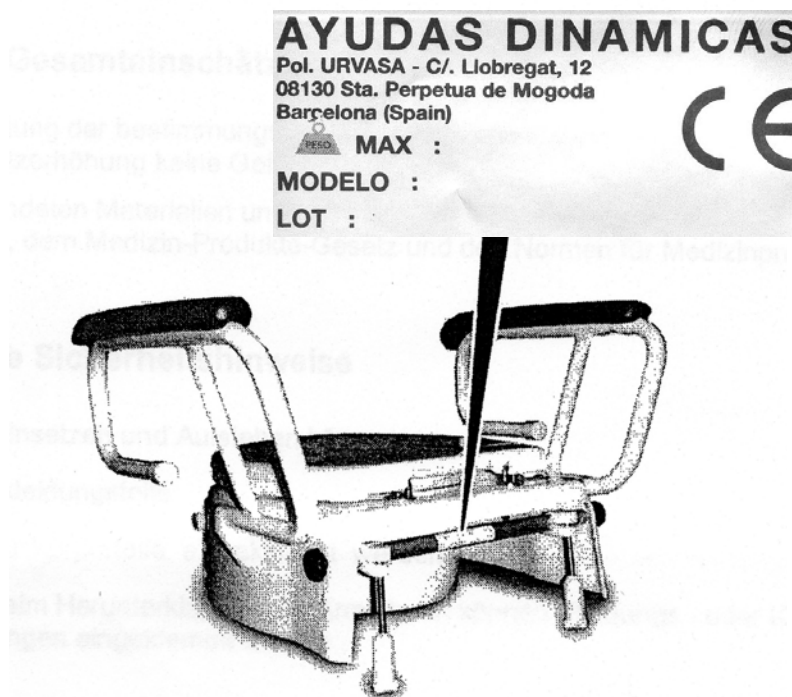

Utilización correcta

El elevador de WC es adecuado para personas cuyo peso corporal no exceda de 100kg.

La instalación a la altura adecuada del elevador de WC, facilitan los traslados desde la silla de ruedas al inodoro.

El elevador de WC no está preparado para utilizarlo como asiento con la tapa bajada.


Seguridad

Para mantener la utilización prescrita, no existe, en el uso, ningún peligro con el elevador del asiento del inodoro.


Los materiales utilizados y la construcción, corresponden a las exigencias de las pautas de la EG, ley de productos médicos y las normas para productos médicos.

Partes

1. Apoyabrazos
2. Tapa
3. Asiento

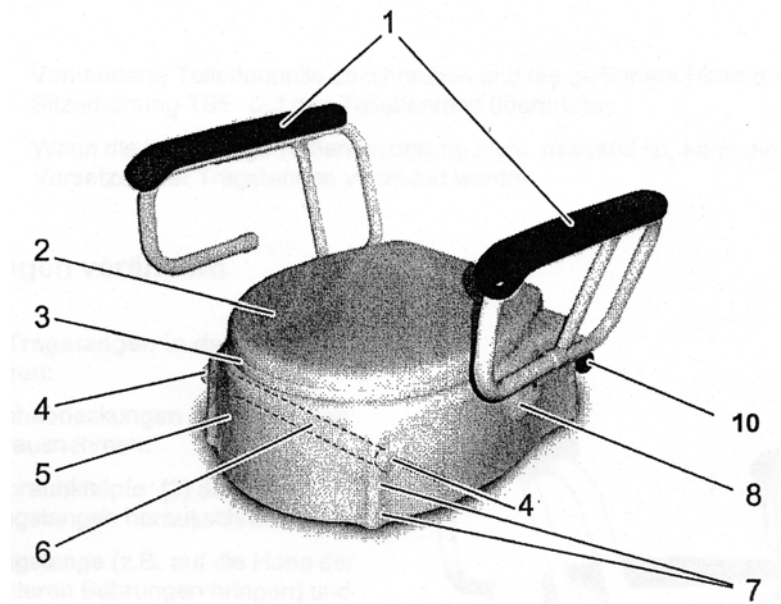

4. Tornillos para la barra transversal delantera
5. Elevador del asiento completo
6. Barras transversales
7. Orificios preparados en ambos lados para variar la altura de las barras transversales.
8. Soporte para los apoya brazos.
9. Fijación de la tapa y del asiento.
10. Tornillos para la barra transversal posterior.

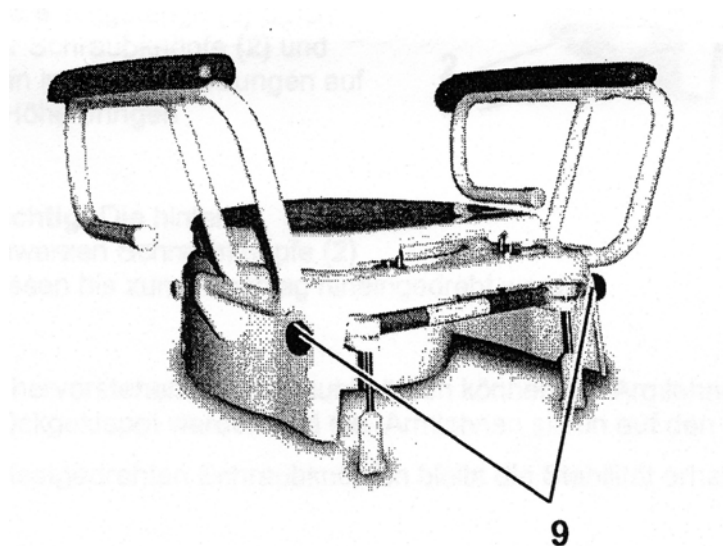


Montaje

El elevador del asiento de WC se puede montar en casi todos los inodoros.

Para adaptar las barras transversales a la altura deseada haga lo siguiente:

- Extraiga los tapones embellecedores de los agujeros (1).
- Desatornille los pomos (2) de las barras transversales.
- Coloque las barras transversales a la altura deseada de los orificios y atornille los pomos otra vez.
- Lleve la parte anterior de la barra transportadora (3) a la misma altura aflojando los botones atornillados (2) y variándolos en otros orificios.

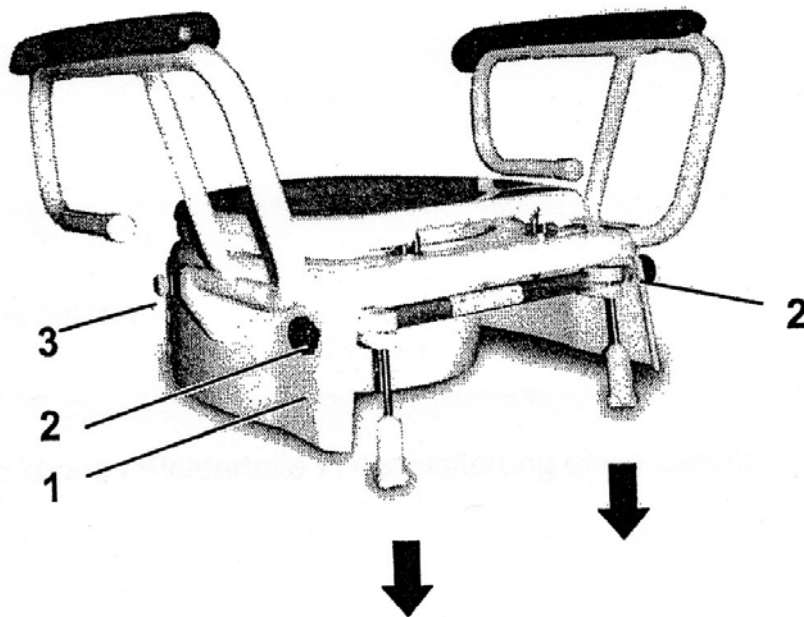

Importante! En la parte posterior de los pomos negros tienen que estar atornillados hasta el tope.

Si los pomos negros estuviesen desatornillados, podrían impedir que los apoyabrazos se pudiesen colocar correctamente, quedando a su vez asentados sobre dichos pomos.


Apretando los pomos negros correctamente, se mantiene la estabilidad correctamente.

Montar el elevador de WC

La distancia del inodoro hasta la pared posterior debe ser como mínimo 18cm. De lo contrario los apoyabrazos no se podrían plegar hacia atrás.

1. Desatornille las tuercas de plástico (flechas) de las barras roscadas.
2. Inserte las barras roscadas en los orificios del inodoro y atorníllelas.
3. Atornille las tuercas de plástico de nuevo.

El elevador de asiento tiene que estar atornillado fijamente, de lo contrario el elevador se puede desplazar al sentarse.

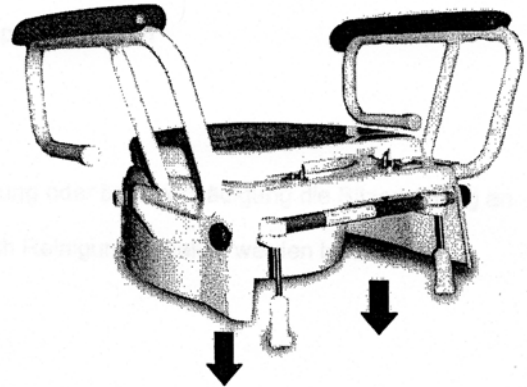


Sentarse

Peligro de vuelco y deslizamiento!

Sentarse siempre recto en el elevador del asiento.

Para sentarse o levantarse, desplace los apoyabrazos hacia atrás.

Al desplazar los apoyabrazos hacia abajo, se puede enganchar partes del vestido en el dispositivo.

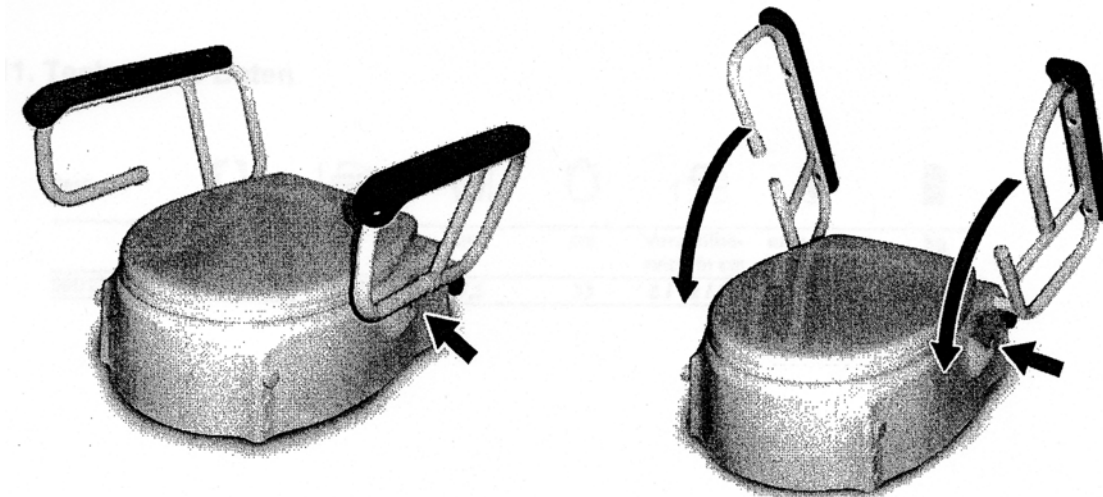

Limpieza

Para la limpieza usar los medios de limpieza habituales en el mercado, no abrasivos.

Limpie el elevador frotándolo con una bayeta húmeda.

Mantenimiento / Inspección

El elevador de asiento del retrete está libre de mantenimiento.

Inspección: compruebe mensualmente todos los tornillos y tuercas estén bien fijados de lo contrario atorníllelos correctamente.



Garantía

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

